



**Vista**<sup>®</sup>  
Lower Spine

独特设计 多样功能

# Vista Lower Spine

展示最具创新的爱斯本产品系列  
可调节Vista®薇斯塔下脊柱支具



Vista薇斯塔下脊柱系列代表了爱斯本创新能力的巅峰。公司在研发方面投入大量资源,生产出最为先进的下脊柱支护系统。对创新的追求直接转化为患者治疗预后的改善和依从性的提高。薇斯塔系列的模块化和全面型设计不仅简化了调节过程,更能提供优越的术后支撑,借助这一独特功能,患者可以随着病情的好转,将无用的部件拆除。

## 均码可调节

**26-70** IN

舒适贴合 26 至 60 英寸的腰围,使用延展板后更能达到 70 英寸。创新的 Sure Slot™ 尺码调节系统使得一件支具可调成多种尺寸,保证每位患者都能享受最贴合的体验。最小库存,最省成本均码可调节意味着您总能找到正确的尺寸,这减少了库存需求,同时显著降低了成本。

### 最小库存,最省成本

均码可调节意味着您总能找到正确的尺寸,这减少了库存需求,同时显著降低了成本。



## 非弹性支具有助于控制下背部疼痛

研究显示,在改善躯干稳定性方面,非弹性腰部支具相比弹性支具更为有效,<sup>1,2</sup>而躯干稳定性是缓解疼痛的关键因素。躯干稳定性的提高有助于减少肌肉的过度负荷,<sup>3</sup>从而显著缓解下背部疼痛。爱斯本支具采用非弹性设计,只为最大限度缓解您的疼痛。

1. Cholewicki J, Lee AS, Reeves NP, Morrisette DC. 《使用不同设计特点的腰骶支具造成的躯干僵硬对比》.《临床生物力学》.2010.
2. Cholewicki J, Reeves NP, Everding VQ, Morrisette DC. 《腰骶支具减少姿势控制任务中的躯干肌肉活动性》.《生物力学杂志》.2007.
3. van Dieen JH, Selen LPJ, Cholewicki J. 《下背部疼痛患者的躯干肌肉激活,文献分析》.《肌电图与运动机能学杂志》.2003.



### 集成型前板

支具两端的前板互相重叠，保证在中线处形成有效支撑。利用爱斯本创新的 FlexTab™ 技术，两块前板能够分散压力，并自然贴合不同病人的身体形态，达到最佳的舒适度。

### 多重背板选项

可拆卸背板提供了最佳的支撑和舒适度，能够满足每位患者的需要。

拆掉全部附件的  
Vista 637 LSO  
薇斯塔637 腰部支具

### Sure Slot™ 系统

独具特色的尺寸调节系统，允许用户无需工具实现快速方便的调节。



### Vista 637 薇斯塔 637 侧板

为需要额外支撑的患者提供更多两侧的支撑力。



### 可靠的结构稳定性

三带技术确保结构稳定，从而实现有效压缩和曲线贴合。

### 易于调节

所有结构性部件都能轻易拆除，或用热塑、弯折和修剪的方式进一步调整，以适应不同患者的情况。

### 符合人体工程学的牵拉把手

伸手即得，牵拉舒适。粘性结合配合缝合材料，保证稳定耐用。



### 高级非弹性压缩

爱斯本的 Super SlickTrack™ 系统能够分别对上下两侧进行收紧，对所需部位进行直接压缩，最大限度地缓解疼痛，而无需依赖患者自身力量。




### Vista 464 TLSO 薇斯塔 464 高度调节

无需使用工具，薇斯塔 464 胸腰支具胸椎带的高度可在 13.7" 到 21.5" 之间进行调节，适应患者的不同体型。



### 薇斯塔 639 卓越支撑

搭配重叠侧板覆盖从耻骨联合到胸骨剑突的区域，提供卓越的灵活性与侧向控制力，实现腰部支具的最大支撑，同时不影响患者舒适度。

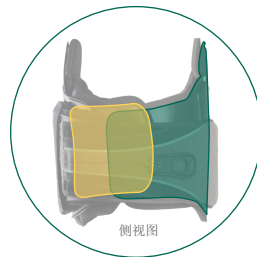

● 2 块侧板

● 前板

### 可调节，多功能

薇斯塔下脊柱系列产品经过独特设计，可自由拆卸，满足每位患者康复过程不同阶段所需的支撑力和运动限制力。



Vista 464 | Vista 639  
薇斯塔 464 | 薇斯塔 639



Vista 637  
薇斯塔 637



Vista 631  
薇斯塔 631



Vista 627  
薇斯塔 627

## The Aspen Advantage

Aspen爱斯本医疗产品公司是市面上最好的脊柱护具生产商之一。对研发的积极投入使Aspen爱斯本产品具有无数的独特优势，这些优势均被冠以 Aspen Advantage 标志。这些优势让医师和患者获得了真正的益处。

另外，爱斯本支具有着 30 多年的临床使用历史，大量研究证明了爱斯本产品的安全、有效、舒适性。值得信赖、确有成效的高质量产品。这就是 Aspen Advantage。

 **Aspen Advantage 标志**  
爱斯本独创的新颖功能

## 提供专家级调节选择

Aspen爱斯本脊柱支具经过独特设计，允许对各结构部件进行拆卸、修剪、弯折、热塑与组装，提供个性化的定制体验。健康专家可以对每副支具进行大幅度调节，从而医治不同患者的具体症状，支持不同的诊断治疗措施，适应不同的支具治疗理念或医嘱。坚固耐用的弹性部件由尼龙、高密度聚乙烯塑料及有色金属制成，具有极佳的支撑作用，允许进行大幅调节，而不会像劣质材料那样折断、变形或破裂。Aspen爱斯本支具能够进行大幅调节，从而进一步提高患者的治疗预后，修剪、弯折与热塑只是众多调节方式中的几种。

关于Aspen爱斯本护具如何大幅度调节的详细信息，或需要文档模板，请联络您当地的Aspen爱斯本销售代理，或访问 [aspenmp.com/product-modifications](http://aspenmp.com/product-modifications)。



## 尺寸信息

26	腰围	60	70
26-60 英寸 (66-152 厘米)			至多 70 英寸 (178 厘米)
Vista薇斯塔下脊柱系列 均码可调节			薇斯塔下脊柱系列 延展板
Vista薇斯塔 464 颈胸支具 · Vista 薇斯塔 639 腰部支具 4 板 · Vista薇斯塔 637 腰部支具 · Vista薇斯塔 631 腰部支具 LoPro · Vista薇斯塔 627 腰托			增加 10 英寸 (25 厘米)

## 产品信息

Vista 薇斯塔下脊柱系列	Vista 464 TLSO薇斯塔 464 胸腰支具	993640
	Vista 639 LS0 4 Panel薇斯塔 639 腰部支具 4 板	993545
	Vista 637 LS0薇斯塔 637 腰部支具	993540
	Vista 631 LS0 LoPro薇斯塔 631 腰部支具 LoPro	993340
	Vista 627 Lumbar薇斯塔 627 护腰	993440
升级包	Vista薇斯塔 464 胸腰支具升级包 - 普通 · 胸椎带高度: 13.7-21.5 英寸 (35-55 厘米)	993644
	Vista薇斯塔 464 胸腰支具升级包 - 高 · 胸椎带高度: 15.2-23 英寸 (39-58 厘米)	993645
替换衬垫	Vista薇斯塔 464 胸腰支具替换衬垫	993642
	Vista薇斯塔 637 腰部支具/薇斯塔 631 腰部支具 LoPro 替换衬垫	993542
配件	Vista薇斯塔下脊柱延展板	993405
	治疗包	990005