



EVERGREEN™

值得您信赖的舒适和支撑

EVERGREEN下脊柱支具

创新的疼痛治疗选择



Aspen Evergreen™ 系列产品采用薄型设计, 有经证实的效果和质量。作为目前治疗的辅助治疗, Evergreen 系列产品为腰痛患者提供了非侵入性和非麻醉性治疗选择。利用非弹性支具提供的治疗级压缩, Evergreen系列产品能提高躯干稳定性, 为过度疲劳而发生痉挛的肌肉提供支撑。

一个型号, 尺寸可调

28-64英寸

简单地调节长度, 或连接延长板, 使支具能适合28至54英寸, 最大64英寸的腰围的患者。符合人体工程学且薄型设计的Evergreen系列产品可以舒适地穿在衣服里面。

最低库存, 最多节省成本

尺寸可调意味着患者始终能有正确的尺寸, 最大限度地减少库存需求, 并显著降低成本。



非弹性支具被证实能有效促进躯干稳定性


研究表明, 非弹性支具在改善躯干稳定性方面明显比弹性支具更有效^{1,2,3}, 躯干稳定性是缓解肌肉痉挛引发疼痛的关键因素。增加躯干稳定性能减轻过度疲劳肌肉的负荷⁴, 因此紧张和疲劳的肌肉可以得到放松。通过多年创新研究和开发, Aspen设计了非弹性下部脊柱支具。

1. Morrisette DC, Cholewicki J, Logan S, Seif G, McGowan S. "A randomized clinical trial comparing extensible and inextensible lumbar orthoses and standard care alone in the management of lower back pain." Spine. 2014.
2. Cholewicki J, Lee AS, Reeves NP, Morrisette DC. "Comparison of trunk stiffness provided by different design characteristics of lumbosacral orthoses." Clinical Biomechanics. 2010.
3. Cholewicki J, Reeves NP, Everding VQ, Morrisette DC. "Lumbosacral orthoses reduce trunk muscle activity in a postural control task." Journal of Biomechanics. 2007.
4. van Dieen JH, Selen LPJ, Cholewicki J. "Trunk muscle activation in low-back pain patients, an analysis of the literature." Journal of Electromyography and Kinesiology. 2003.



成型·弯曲·修剪 便于进行定制修改

所有结构部件都易于拆卸，并且可以进行热成型、弯曲或修剪处理，以适应不同患者的情况。

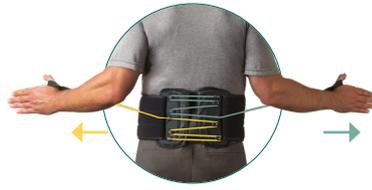

独立收紧机制 ④


Aspen专利且先进的4:1 SlickTrack™机械系统具有独立的上下紧缩机制，提供对肌肉的直接压缩，支撑紧绷的肌肉。

集成前板 ④

前板重叠以提供增强的中线支撑。这些面板采用Aspen创新的FlexTabs™材料制成，可以分散压力并自然地符合身体结构以增加舒适度。

可靠的结构完整性 ④

集成的直立支具体和耐用的加固材料提供产品稳定性和结构完整性，同时在需要时也可灵活调整。

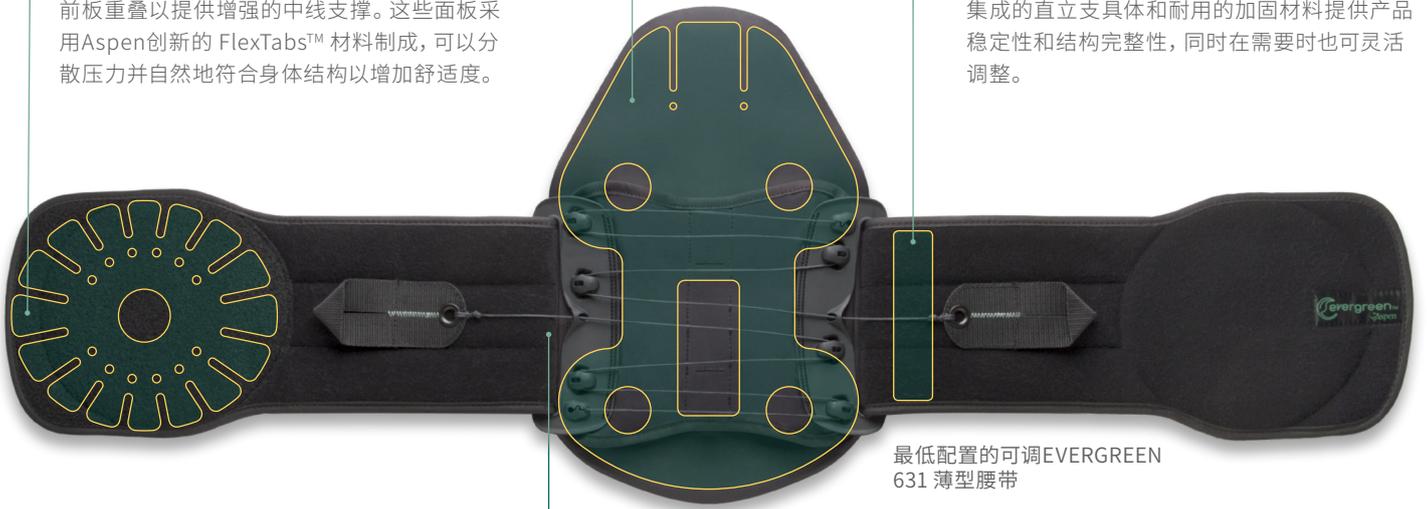

最低配置的可调EVERGREEN 631 薄型腰带

一个型号，尺寸可节



直通式尺寸调节机构，无需使用工具即可快速轻松地进行调整。



舒适的拉带

大拉带头易于定位和抓握。



定制支撑 ④

紧固时，坚固但柔韧的后板能自然符合患者的脊柱前弯，从而提供额外的结构支撑。



佩戴舒适

Evergreen 支具适合长时间佩戴，可轻松地穿在衣服下面。



Evergreen 621 SI Belt (髂骨带)

支具内侧的硅胶条可快速固定，有助于特别在活动或坐下时防止髂骨带移动。两根易于定位的拉带可调节压力，而不会出现使用单根拉带系统时出现的脊柱旋转。



Evergreen 456 TLSO (胸腰骶支具)

该支具帮助患者恢复一般功能，同时改善促进复杂脊柱疾病恢复的动态环境。

Aspen的优势

Aspen医疗产品有限公司为市场生产优质的脊柱支具。对研发的积极投入使Aspen产品具有无数的独特创新优势，这些优势均被冠以Aspen Advantage 标志，这些优势给从业者带来真正的益处，并帮助无数患者重新恢复他们所关心的活动。这是值得您信赖并能带来积极效果的优质产品。这就是Aspen的优势。




ASPEN的优势标记

Aspen产品独有的创新特点


提供专家级调节选择

Aspen下脊柱支具经过独特设计, 允许对各结构部件进行拆卸、修剪、弯折、热塑与组装, 提供个性化的定制体验。健康专家可以对每副支具进行大幅度调节, 从而医治不同患者的具体症状, 支持不同的诊断治疗措施, 适应不同的支具治疗理念或医嘱。坚固耐用的弹性部件由尼龙、高低密度聚乙烯塑料及有色金属制成, 具有极佳的支撑作用, 允许进行大幅调节, 而不会像劣质材料那样折断、变形或破裂。Aspen支具能够进行大幅调节, 从而进一步提高患者的治疗预后, 修剪、弯折与热塑只是众多调节方式中的几种。

关于Aspen爱斯本护具如何大幅度调节的详细信息, 或需要文档模板, 请联络您当地的Aspen销售代理, 或访问 aspenmp.com/product-modifications。

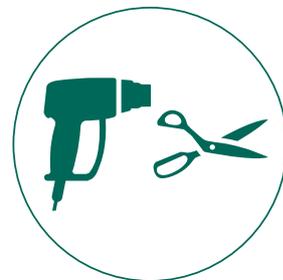

尺寸信息

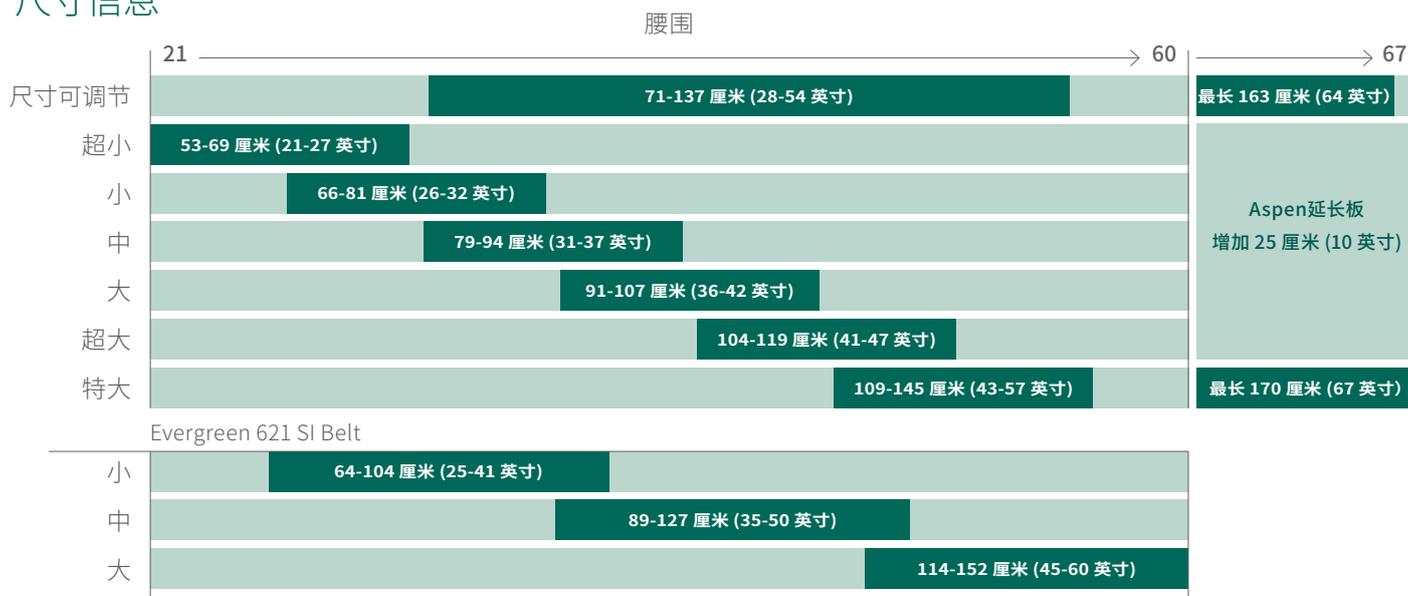

产品信息

Evergreen 456 TLSO	尺寸可调节	36-5611						
Evergreen 637 LSO	尺寸可调节	36-3711	超小	36-3702	中	36-3704	超大	36-3706
			小	36-3703	大	36-3705	特大	36-3707
Evergreen 631 LSO LoPro	尺寸可调节	36-3111	超小	36-3102	中	36-3104	超大	36-3106
			小	36-3103	大	36-3105	特大	36-3107
Evergreen 627 Lumbar	尺寸可调节	36-2711	超小	36-2702	中	36-2704	超大	36-2706
			小	36-2703	大	36-2705	特大	36-2707
Evergreen 626 Lumbar Lite	尺寸可调节	36-2611	超小	36-2602	中	36-2604	超大	36-2606
			小	36-2603	大	36-2605	特大	36-2607
Evergreen 621 SI Belt			小	36-2102	中	36-2104	大	36-2106
配件			Aspen延长板				992505	